

**Philips Healthcare ist ein  
Unternehmen der Royal  
Philips Electronics**

**So erreichen Sie uns**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)

[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

fax: +31 40 27 64 887

**Asien**

+852 2821 5888

**Europa, Mittlerer Osten, Afrika**

+49 7031 463 2254

**Lateinamerika**

+55 11 2125 0744

**Nordamerika**

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respirationics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

**Kundendienst**

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)

**Respirationics Deutschland**

+49 8152 93 06 0

**Respirationics Europa, Mittlerer  
Osten, Afrika**

+33 1 47 52 30 00

**Respirationics Schweiz**

+41 6 27 45 17 50

[www.philips.com/respirationics](http://www.philips.com/respirationics)

[www.respirationics.de](http://www.respirationics.de)

Bitte besuchen Sie uns unter <http://everflo.respirationics.de/>



Respirationics et EverFlo sind Marken von Respirationics Inc. und verbundener Unternehmen.  
Alle Rechte vorbehalten.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegt.

RIT.HMV.015.G \* MAI 2010

**EverFlo**



# Kurzanleitung


**PHILIPS**  
RESPIRONICS

**Schließen Sie  
Ihre Nasenkanüle an den  
Sauerstoffauslass an.**

**Drehen Sie das  
Stellrad zum  
Einstellen der  
Sauerstoffabgabe auf  
0,5 bis 5 LPM ein**

**LED  
Alarmanzeige**

**Schalten Sie  
hier den  
Konzentrator ein**

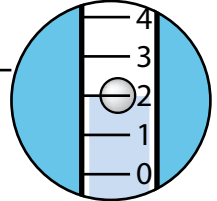

Beispielenstellung  
von 2 LPM

## Nötige Produktpflege:

Reinigen Sie regelmässig die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, daß die Filteröffnungen nicht verstopft sind.

# So schließen Sie Ihren Luftbefeuchter an:



1. Nehmen Sie den Verbindungsschlauch aus der Filterkappe.



2. Verbinden Sie den Verbindungsschlauch mit der Befeuchterflasche



3. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Sauerstoffauslaß

## Alarme

	Das Gerät ist eingeschaltet und arbeitet einwandfrei.
Nur akustischer Alarm	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob es einen Stromausfall gibt.
	Geringe Sauerstoffkonzentration: nutzen Sie das Gerät weiter, verständigen Sie jedoch Ihren medizinischen Fachhändler.
	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Bleibt der Zustand erhalten, so schalten Sie das Gerät aus und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.
	Schalten Sie das Gerät aus: prüfen Sie ob das Netzkabel eingesteckt ist, prüfen Sie das Sauerstoffeinstellrad, prüfen Sie die Nasenkanüle, prüfen Sie die Verbindung zum Befeuchter.
	Schalten Sie das Gerät aus. Nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.

**Bleibt der Alarmzustand bestehen so nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.**

Diese Kurzanleitung ist als Kurznachschlagewerk für den Einsatz des EverFlo gedacht. Sie ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung, die vollständige Informationen und Anleitungen für den Einsatz des Gerätes enthält. Respironics ist ein registrierter Markenname und EverFlo ist ein eingetragendes Warenzeichen von Respironics, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen. © Respironics Inc. und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.